


CATÁLOGO APARATOLOGÍA 2026

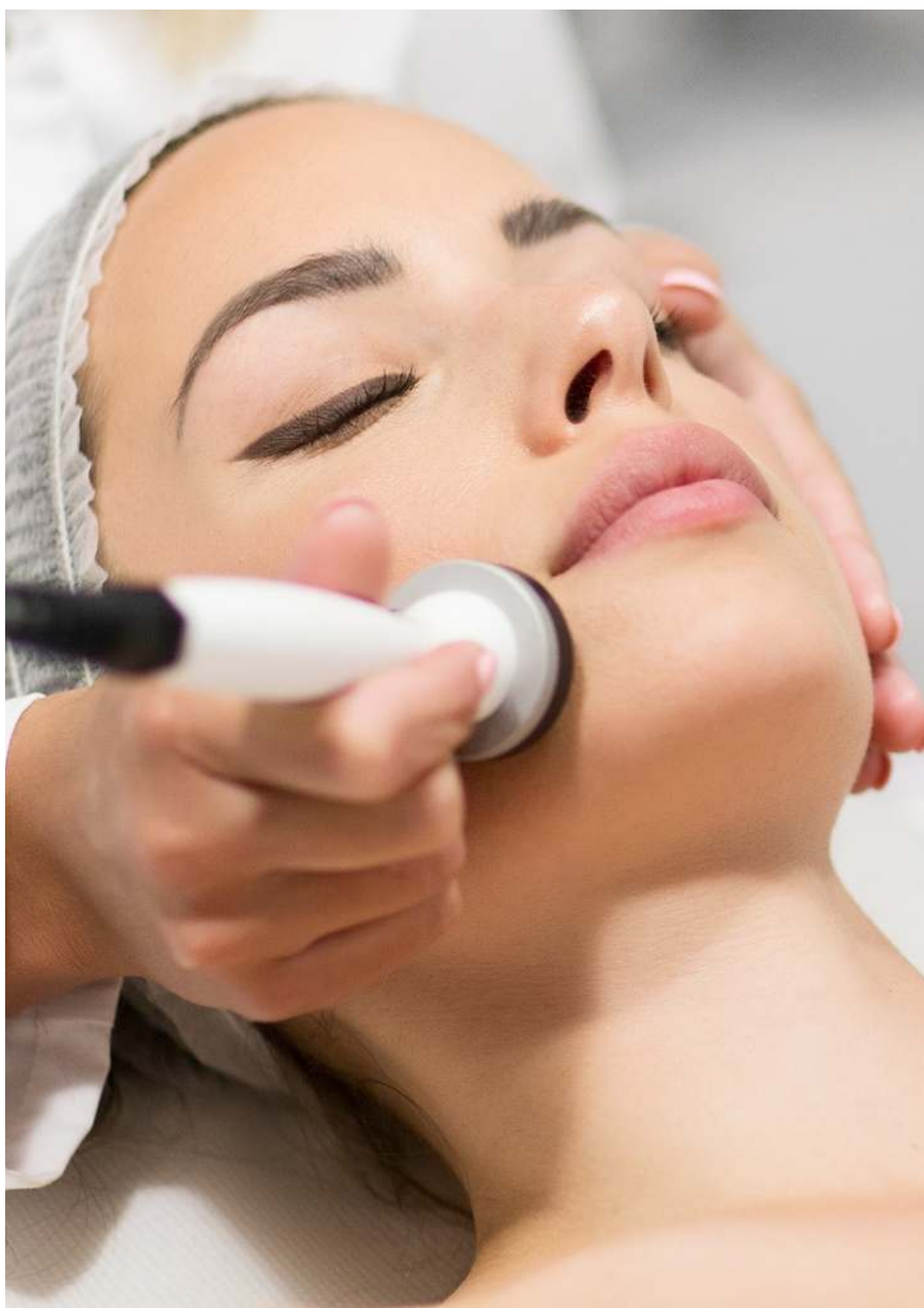

cosbell

Avenida Real de Pinto, 75
28021. Madrid. España

Tlf: +34 91 797 90 040
Mail: info@cosbell.es



cosbell

Cosbell presenta una amplia variedad de tecnologías en aparatos en el mundo de la estética.

***Escanea el código QR para ver nuestra web:**

www.cosbell.eu



Índice

01

APARATOLOGÍA OVERLINE	5
ELITE	6
LLLT TOTAL BODY PRO.	7
LLLT TOTAL BODY RFF	11
ELITE FRACTIONAL RF PLUS (25 W)	12
RF ENERGY SYSTEM-BODY PLATE	13
BODY SCULPT PRO	15
INFINITY	16
INFINITY FACE LAB	17
INFINITY TOTAL BODY SCULPT	19
BODY SYNERGY LASER 980 NM	21
XILIA	23
RF CHROME LIGHT-FACE & BODY	24
RF - FACE & BODY FRACTIONAL	27
RF - FACE FRACTIONAL	28
EXENTIAL	29
EXENTIAL RADIOFRECUENCIA FACE	30
EXENTIAL DP - MICRODERMOABRASIÓN	31
EXENTIAL ULTRASONS 25HZ	33
EXENTIAL OXY	34
EXENTIAL STIMOL 8	35
EPILATION 5 LIGHT	36
SMART	37
BODY SLIM SWINGING MASSAGE	38
BODY SLIM ENDOMASSAGE	40

Índice

02

APARATOLOGÍA QETRE

42

EPIL SPEEDY NCE

43

03

APARATOLOGÍA FREIHAUT

45

HEAT WAVE TERMOFRECUENCIAS INFRARROJAS

46

DRAIN 2000 (SISTEMA COMPRESIÓN DINÁMICA)

48

04

APARATOLOGÍA KLAPP

51

AQUADERM

52

HC9 (TERAPIA LUZ)

54

HC3 SKINSHOOTER

56

05

COMPLEMENTOS APARATOLOGÍA

57

OVER VAP

58

LÁMPARA LED+LUPA

MANTAS ELÉCTRICAS

59

APARATOLOGÍA OVERLINE

Overline, siempre al servicio del mundo de la estética, ofrece respuestas concretas a todas las necesidades y para todas las imperfecciones, actuando con excelentes resultados en todo tipo de tratamientos.

Herramientas fiables, resistentes y seguras, fabricadas en Italia con todos los certificados y garantías necesarios para ser usados en la UE.



Certificación del Sistema de
Gestión de Calidad



Certificación para la
Gestión de la Seguridad y
Salud de los Trabajadores



Certificación del Sistema de
Gestión de Calidad de
Productos Sanitarios

OVERLINE
ITALIA



MAQUINARIA **ELITE**



OVERLINE
ITALIA

LLLT TOTAL BODY PRO

OV3238



Equipo quipo de última generación multifunción que utiliza una combinación de tecnologías eficaces para cualquier tratamiento corporal y facial. Permite intervenciones reductoras, elastizantes, tonificantes, moldeadoras, reafirmantes y drenantes.

Características:

- Alimentación: 50 - 60 Hz
- Potencia absorción: 100 W
- RF: 450 KHz
- Electroporación: 800 Hz-1.6 KHz
- Ultrasonido: 9W por cabezal

LLLT TOTAL BODY PRO

OV3238

Tecnologías incluidas

- Láser Lipolítico (LLLT) con acción estimulante, focalizada y no invasiva, favoreciendo el intercambio y la eliminación de grasa.
- Endomasaaje acción drenante y oxigenación del tejido.
- Ultrasonidos 1MHz con acción reductora.
- Electrolipólisis para tonificar.
- Radiofrecuencia con acción regeneradora y reafirmante.
- Radiofrecuencia fraccionada regenerar, reafirmar, tratar cicatrices, estrías.
- Electroporación aumento permeabilidad del tejido.
- Cromoterapia potenciar tratamiento con la energía del color

Manípulos Corporal

Synergy Ultra

- Ultrasonido
- Electrolipólisis
- Electroporación
- Cromofrecuencia
- Láser Lipolítico



Synergy Endo

- Radiofrecuencia
- Masaje Endotérmico *
- Cromofrecuencia
- Láser Lipolítico

*Diferentes cabezales

MASAJE ENDERMOLÓGICO

3 CABEZALES DIFERENTES*



Endermología con rodillos + RF

Favorece el tratamiento de zonas con flacidez y celulitis blanda



Endermología con rodillos

Favorece el tratamiento de zonas amplias- masaje drenante superficial y profundo. Celulitis dolorosa



Endermología con Esferas

Promueve el movimiento rotatorio.
Remodelación y masaje.
Celulitis más fibrosa

MANÍPULOS RADIOFRECUENCIA

Corporal

Manípulo inteligente y ergonómico, con detección de la temperatura. Con LEDS integrados para realizar cromoterapia. Pantalla indicadora del tiempo de ejecución



Bipolar

- Tratamiento para reafirmar el tejido.
- Mejora la microcirculación.
- Tratamiento de celulitis .

Facial y Corporal



Tratamiento Facial:

- Arrugas
- Flacidez
- Cicatrices
- Marcas acné

Tratamiento Corporal:

- Estrías
- Cicatrices
- Flacidez



Fraccionada
12 púas



Fraccionada
37 púas

LLLT TOTAL BODY RFF

OV3239



Synergy Endo

- Radiofrecuencia
- Masaje Endotérmico *
- Cromofrecuencia
- Láser Lipolítico

*Diferentes cabezales



Radiofrecuencia
Bipolar - Corporal



Radiofrecuencia Fraccionada
Facial y Corporal



*Diferentes cabezales

Equipo de última generación multifunción que utiliza una combinación de la endermología y la radiofrecuencia para cualquier tratamiento corporal y facial.

Características:

- Alimentación: 50 - 60 Hz
- Potencia absorción: 100 W
- RF: 450 KHz

ELITE FRACTIONAL RF PLUS

OV3186

Élite Resolution Fractional RF combina los tres tipos más eficaces de radiofrecuencia facial y corporal: RF Bipolar, Multipolar y Fraccionada.

Estos métodos de trabajo permiten utilizar esta tecnología con una gran flexibilidad, pudiendo realizar tanto tratamientos faciales, para el rejuvenecimiento instantáneo, como tratamientos corporales, para una reducción visible de las imperfecciones causadas por la celulitis.

Características:

- Alimentación: 50 - 60 Hz
- Potencia absorción: 100 W
- RF: 450 KHz



Corporal:

RF Bipolar

RF Multipolar



RF Fraccionada



Facial:



RF Bipolar

RF ENERGY SYSTEM- BODY PLATE

OV3180




RF ENERGY SYSTEM, es un equipo innovador que permite seleccionar y combinar entre ellas diversos tipos de ondas eléctricas. Dotado de 8 placas que transmiten conjuntamente una onda bipolar de RF y una electroestimulación, garantizando resultados únicos, mejorando la microcirculación y realizando un efecto lipolítico.


RF ENERGY SYSTEM BODY PLATE

Tecnologías incluidas

- Radiofrecuencia, reduce las imperfecciones que afectan a la zona más superficial de la piel, como las estrías, celulitis.
- Electro Remodelación, estimula las fibras musculares generando contracciones fisiológicas que contribuyen a la tonificación, frenando la formación de celulitis.
- Electrolipólisis, reducción de acumulaciones de celulitis, favoreciendo la circulación local aumentando las necesidades metabólicas de las células.
- Masaje Drenante, acción tonificante y drenante, mejorando la elasticidad de los músculos y tejidos, favoreciendo la eliminación de líquidos y de toxinas.

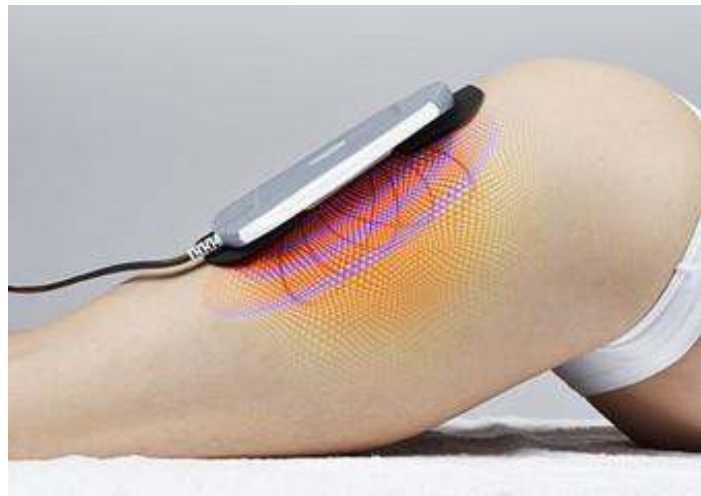

Manípulo - PLACAS

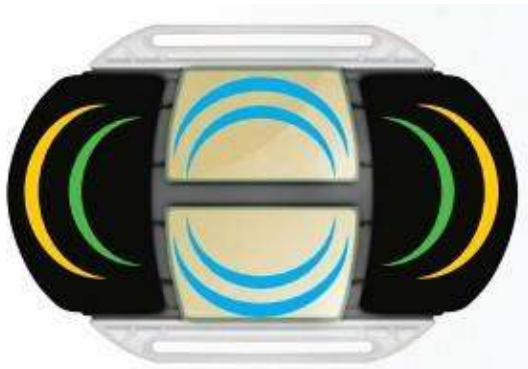

- Electrolipólisis
- Electro Remodelación
- Masaje Drenante
- Radiofrecuencia

BODY SCULPT PRO

OV3190

Equipo de última generación, que utiliza la combinación de 4 tecnologías eficaces para remodelar la silueta.

- Onda de choque
- LLLT (Láser Lipolítico)
- RF Multipolar
- Vacuum

4 acciones que trabajan en sinergia en un mismo manipulador, permitiendo reducir, estimular, tonificar, remodelar y drenar.



Manípulo - TECHNOWAVE

- Reducción de imperfecciones causadas por la celulitis.
- Reducción de adiposidades.
- Mejora firmeza y elasticidad del tejido.
- Estimulación de procesos biológicos.
- Estimulación producción de colágeno.

MAQUINARIA **INFINITY**



OVERLINE
ITALIA

INFINITY FACE LAB

OV1150-80

Equipo de última generación, que utiliza la combinación de tecnologías que permiten definir la ruta de tratamiento más útil para mejorar o mitigar imperfecciones faciales.

Combina diferentes tecnologías:

- Macrocam para realizar un análisis
- Control de hidratación
- MicroDermoabrasión
- RF Multipolar
- RF Fraccionada
- Ultrasonidos 3MHz
- Máscara Cromoterapia

Efectos faciales:

- Prevención y detección de problemas y desequilibrios
- Control de hidratación
- Renovación celular
- Estimulación metabolismo celular
- Aumento de la microcirculación sanguínea y linfática
- Estimulación síntesis de colágeno y elastina
- Aumento de la elasticidad
- Efecto lifting, anti-aging
- Reafirmación y reestructuración del óvalo facial.
- Fácil de usar
- Resultados visibles en poco tiempo
- Sin tiempo de recuperación



Características:

- Alimentación: 50 - 60 Hz
- Potencia absorción: 80 W
- RF: Frecuencia 450 KHz
Potencia: 15 W
- Resistencia: 315 mA
- Ultrasonido:
Frecuencia: 3MHz
Potencia: 9 W por cabeza

INFINITY FACE LAB

OV1150-80



MACROCAM- CÁMARA DE VISUALIZACIÓN

Cámara de altísima calidad que permite analizar y examinar la calidad de la epidermis en aumento, para intervenir y establecer con el tratamiento correcto. Guarda imágenes antes y después para realizar comparativas y verificar los resultados.

ULTRASONIDOS 3 MHZ

MICRO-
DERMOABRASIÓN



RADIOFRECUENCIA
MULTIPOLAR Y BIPOLAR



RADIOFRECUENCIA
FRACCIONADA



MÁSCARA
CROMOFRECUENCIA



CONTROL DE HIDRATACIÓN

INFINITY TOTAL BODY SCULPT

OV3238-90

Equipo de última generación, que utiliza la combinación de tecnologías eficaz para remodelar la silueta.

9 acciones que pueden trabajar en sinergia, permitiendo reducir, estimular, tonificar, remodelar y drenar.

Combina nueve tecnologías:

- Ondas de choque (Onda batente)
- LLLT (Láser Lipolítico)
- RF Multipolar y Bipolar
- Vacuum
- Electrolipólisis
- Electroporación
- Cromofrecuencia
- Ultrasonido 1MHz
- Endomasaaje

Efectos sobre el cuerpo:

- Efecto drenante
- Reduce la celulitis
- Reduce acumulaciones de grasa localizada.
- Mejora la elasticidad de la piel
- Estimula la producción de colágeno
- Estimula los procesos biológicos naturales
- Mejora la vehiculización del principio activo.

Características:

- Alimentación: 50 - 60 Hz
- Potencia absorción: 100 W
- RF: Frecuencia 450 KHz
Potencia: 25 W
Resistencia: 315 mA
- Ultrasonido:
Frecuencia: 1MHz
Potencia: 9 W por cabeza
- Onda choque: Potencia: 0.5-4 bar
Frecuencia: 1 - 12 Hz



INFINITY TOTAL BODY SCULPT

OV3238-90



TECHNO WAVE

Combina cuatro tecnologías:

- Onda batiente
- LLLT
- Radiofrecuencia Multipolar
- Vacuum



SYNERGY ENDO

Combina cuatro tecnologías:

- Endomasaje
- LLLT
- Radiofrecuencia Multipolar
- Cromofrecuencia



SYNERGY ULTRA

Combina cinco tecnologías:

- Ultrasonido 1MHz
- LLLT
- Electroporación
- Cromofrecuencia
- Electrolipólisis



MANUAL RF

Dos manípulos:

- Radiofrecuencia Multipolar
- Radiofrecuencia Bipolar

BODY SYNERGY LASER 980NM

OV3245-45



Nueva tecnología Overline Infinity Body Synergy Laser 980nm, para la remodelación y tonificación del cuerpo.

Combina múltiples tratamientos en un solo movimiento.

Consiste en 8 placas que actúan en sinergia dotadas de cinco tecnologías diferentes que se desarrollan al unísono para lograr resultados concretos y visibles.

Aprovecha el uso de placas ligeramente cóncavas, diseñadas para adaptarse mejor al cuerpo.

Actúa en profundidad y con eficacia sobre acúmulos de grasa localizada, celulitis, retención de líquidos y flaccidez del tejido.

Tratamientos indooros, seguros y eficaces.

Combina cinco tecnologías:

- LLLT
- Electrolipólisis
- Ultrasonidos
- Electroporación
- Electroremodelación


BODY SYNERGY LASER 980NM

OV3245-45


● Electro Remodelación



● Electrolipólisis

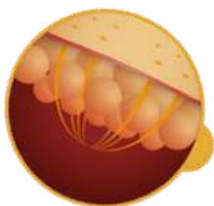

● LLLT

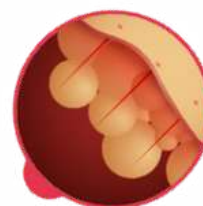

● Ultrasonido



● Electroporación



MAQUINARIA **XILIA**



OVERLINE
ITALIA

RF CHROME LIGHT- FACE & BODY

OV760

Equipo que utiliza la RADIO FRECUENCIA corporal y facial, garantizando la posibilidad de actuar con eficacia sobre diferentes inestetismos para llevar la energía a diversas profundidades de la piel y combinarla con la acción de la luz LED.

Cuenta con una serie de programas que combinan secuencias de tratamientos para mejorar las imperfecciones de la celulitis, exceso de tejido adiposo y reafirmación del tejido.

- Acción conjunta RF + LED
- Radiofrecuencia bipolar facial y corporal
- Radiofrecuencia multipolar +LED facial y corporal

Características:

- Alimentación: 50 - 60 Hz
- Potencia absorción: 90 W
- RF: Frecuencia 450 KHz
Potencia: Cara 10 W
Cuerpo: 25 W
Resistencia: 315 mA



Tipos de Radiofrecuencia Corporal

OV760




Radio Frecuencia Corporal Bipolar

El efecto de la RF se basa en la transformación de la energía en calor. Cabezal con dos polos entre los cuales se genera un arco provocando el aumento de temperatura más superficial.

Aumenta el metabolismo celular, acelerando la microcirculación sanguínea, librando al tejido intersticial de los edemas, reactivando la lipólisis, reduciendo flacidez.

IDEAL PARA:


- Tratamiento de celulitis
- Tratamiento de reafirmación de tejido

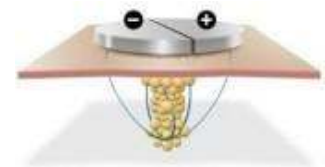

Radio Frecuencia Corporal Multipolar + LED

La RF multipolar tiene varias polaridades que rotan en el mismo cabezal y oscilan en un campo magnético de forma simultánea, generando una energía.

y un calentamiento del tejido homogéneo, rápido e indoloro. Combinación RF con frecuencia cromática.

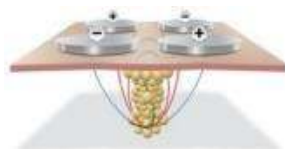

IDEAL PARA:

- Incremento de la circulación sanguínea y linfática
Estímulo del fibroblasto (flacidez).
- Regeneración y formación de nuevo colágeno mejorando estructura de los tejidos a largo plazo.

Tipos de Radiofrecuencia Facial

OV760



Radio Frecuencia Facial- BIPOLAR

Rejuvenecer la piel por aumento de la temperatura por vía subcutánea que provoca la desnaturalización de las proteínas de colágeno.

La piel se contrae y expande (efecto lifting), lo que supone un aumento de la consistencia de la dermis. Activa los fibroblastos con un aumento de producción de colágeno y elastina.

IDEAL PARA:

- Tratamiento arrugas
- Tratamiento para signos de envejecimiento



Radio Frecuencia Facial- MULTIPOLAR + LED

La RF multipolar, gracias al aumento de temperatura del tejido conectivo los fibroblastos comienzan a producir nuevo colágeno y elastina.

Se reducen las arrugas , los signos de envejecimiento, se produce un efecto de compactación y de relajación de los tejidos.

Combina el efecto de la RF junto con el efecto del color.



IDEAL PARA:

- Tratamiento Reafirmación (Efecto lifting)



RF- FACE & BODY FRACTIONAL

OV765



Equipo que combina 3 tipos de Radiofrecuencia (Bipolar, Multipolar, Fraccionada) para tratamientos faciales y corporales.

Método de trabajo que permite una gran versatilidad y eficacia sobre los problemas estéticos causados por la celulitis, flaccidez, arrugas, cicatriz para conseguir inmediatos efectos regeneradores, estimulantes.

- Incremento de la circulación sanguínea y linfática
- Celulitis
- Estímulo del fibroblasto (flaccidez)
- Regeneración y formación de nuevo colágeno mejorando estructura de los tejidos a largo plazo
- Arrugas
- Cicatrices, Estrías

FACIAL:



RF Bipolar



RF Multipolar



RF Fraccionada

Características:

- Alimentación: 50 - 60 Hz
- Potencia absorción: 100 W
- RF: Frecuencia 450 KHz
- Potencia: Cara 15 W
Cuerpo: 25 W
- Resistencia: 315 mA

CORPORAL:



RF Multipolar

Capaz de enfocar el rango de acción en un solo punto a través del sistema de 4 polos

RF Bipolar

RF-FACE FRACTIONAL

OV865

Equipo que combina 3 tipos de Radiofrecuencia (Bipolar, Multipolar, Fraccionada) para tratamientos faciales.

Método de trabajo que permite una gran versatilidad y eficacia sobre los problemas estéticos visibles de flacidez, arrugas, cicatrices, envejecimiento para conseguir inmediatos efectos regeneradores, estimulantes.



Características:

- Alimentación: 50 - 60 Hz
- Potencia absorción: 100 W
- RF: Frecuencia 450 KHz
- Potencia: 15 W
- Resistencia: 315 mA

MANÍPULO FACIAL :



RF Bipolar



Acción regenerante. Gran efecto lifting. Permite atenuar las arrugas y signos de envejecimiento a través del calor, estimulando los fibroblastos.

RF Multipolar



Acción antienvjecimiento. Mediante el aumento de temperatura, reorganiza las líneas de tensión de la piel, además de estimular el fibroblasto. Gran efecto lifting.

RF Fraccionada



Acción profunda capaz de combinar la termestimulación resistiva para la remodelación de la dermis con la corrección de irregularidades, creando un rejuvenecimiento y aumentando el espesor del tejido.

MAQUINARIA **EXENTIAL**



OVERLINE
ITALIA

EXENTIAL RADIO FRECUENZA FACE

OVEXE824



Equipo que utiliza la RADIO FRECUENCIA FACIAL BIPOLAR, garantizando la posibilidad de actuar sobre los diversos problemas de la piel a distintas profundidades.

Trabaja con un manipulador con :

RF BIPOLAR



BENEFICIOS:

- Reafirmación de la piel y reducción de arrugas profundas.
- Estimulación del crecimiento del colágeno y aumento de la flexibilidad de la piel.
- Mejora el metabolismo de la piel.
- Mayor resistencia del rostro ante el proceso de flacidez.

Características:

- Potencia: 10WATT 450kHz
- Dimensiones: L 392mm x P 360mm x H 145mm

EXENTIAL DP DERMOABRASIÓN

OVEXE820



Equipo que permite eliminar los estratos epidérmicos favoreciendo el aumento del intercambio celular del tejido tratado. Mejora la permeabilidad de la piel, favoreciendo una mejor absorción de los productos cosméticos utilizados durante el tratamiento.

Características:

- Alimentación: 50 - 60 Hz
- Aspiración: 60 cm Hg Max. -24 V cc

MICRODERMOABRASIÓN CON ENDERMOLOGÍA

Sistema de renovación dérmica usando cabezales estériles exfoliantes para el tratamiento de eliminación de arrastre de las células muertas de la capa superior de la piel, junto con el sistema de vacío elimina las partículas de impureza y las células muertas por succión.

BENEFICIOS:

- Elimina impurezas de la piel
- Oxigena la piel.
- Trata marcas post-acneicas
- Disminuye tamaño y afina el poro más dilatado
- Trabaja sobre el envejecimiento tratando arrugas pequeñas
- Elimina daños causados por la luz y el Sol (oxidación)
- Trabaja sobre estrés



Cuatro cabezales con gramajes diferentes:



9442. Piel sensible, delicada. Bajo Gramaje



9444. Piel normal, seca, arruga. Medio Gramaje



9446 Piel grasa, hiperqueratinizada, arruga profunda, cuerpo. Alto Gramaje



9448. Drenar bolsa, ojera. Masaje/Endermología

EXENTIAL ULTRASONS 25kHz

OVEXE814



Realiza una limpieza profunda y penetración de los principios activos. Une el efecto de los ultrasonidos con la vibración de la espátula para efectuar un peeling mecánico y tratamientos faciales. Las diferentes frecuencias permiten realizar una acción regenerante, tonificante, elastizante con óptimos resultados sobre todo tipo de pieles, gracias a sus 14 programas específicos.



BENEFICIOS:

- Realiza limpieza profunda
- Canalización de activos
- Peeling mecánico profundo y seguro
- Mejora la regeneración de la piel
- Reafirma el tejido y tonifica

Características:

- Alimentación: 230 Vca 50/60 Hz
- Dimensiones: L 390 mm x P 360 mm x H 145 mm

EXENTIAL OXY

OVEXE851



El oxígeno estimula la respiración celular, mejora la tonacidad de la piel y le da un aspecto más elástico, firme y luminoso.

Reduce las irritaciones, actúa sobre las estrías y cicatrices, favorece el equilibrio y la hidratación de la piel, la descongestión y también es un excelente antiinflamatorio y antibacteriano. El tratamiento no tiene efectos colaterales, no es invasivo.

Permite realizar el tratamiento aislando el oxígeno del resto de gases presentes en la atmósfera, para potenciar el efecto

Se realiza mediante un aerógrafo dotado de un recipiente en el cual se introduce el principio activo.



BENEFICIOS:

- Efecto antiinflamatorio.
- Efecto antibacteriano.
- Reduce congestión.
- Aumenta hidratación.
- Aumenta la permeabilidad de la piel
- Perfecto para introducción de principio activo.

Características:

- Alimentación: 230 Vca 50/60 Hz
- Dimensiones: L 385 mm x P 370 mm x H 150 mm

EXENTIAL STIMOL 8

OVEXE720



Equipo que permite el tratamiento de electroestimulación muscular a través de programas con estimulación gradual y progresiva. La electroestimulación actúa de forma selectiva sobre grupos de músculos facilitando la modelación de las zonas deseadas.

La pantalla gráfica le permite ver esquemas indicativos de la colocación de las placas y la variación de los parámetros.

Cuenta con 8 canales que permiten utilizar 16 placas en total.



BENEFICIOS:

- 8 programas de estimulación (cuerpo y facial)
- Estimulación muscular
- Drenaje linfático
- Aumenta metabolismo de las grasas
- Reafirmación

Características:

- Alimentación: 230 Vca 50 - 60 Hz
- 0.4 mA en electrodos 8x12 cm
- 0.8 mA en electrodos 6x8 cm



EPILATION 5 LIGHT

OV550



Equipo para eliminación del vello. Permite eliminar el vello indeseado de una forma progresiva, en solo unas sesiones, de un modo rápido, eficaz y sobre todo indoloro.

Con EPIL 5, puedes escoger entre diferentes métodos:

- Método Blend
- Método Needle
- Método Super Flash
- Método Super Flash 3
- Método Electrolipólisis



Características:

- Alimentación: 230 Vca 50/60 Hz
- Frecuencia de Trabajo: 3,390 Mhz
- Dimensiones: L 450 mm x P 345 mm x H 180 mm

MAQUINARIA **SMART**



OVERLINE
ITALIA

BODY SLIM SWINGING MASSAGE

OV3190



Equipo de masaje oscilante continuo de presión alterna, conocido como **ONDA DE CHOQUE**.

Indicado para resolver problemas de exceso de volumen, celulitis, grasa localizada o como tratamiento para ponerse en forma a última hora.

Trabaja con un manipulador de ondas de choque



BENEFICIOS:

- Reducción de la celulitis y de la grasa localizada y compacta.
- Reducción de imperfecciones causadas por celulitis, piel de naranja.
- Mejora el metabolismo de la piel.
- Mejora elasticidad y firmeza del tejido.
- Estimula producción de colágeno.
- No necesita tiempo de recuperación.
- Resultados visibles en poco tiempo.

Características:

- Potencia:
- Dimensiones: L 470mm x P 430mm x H 250mm

BODY SLIM SWINGING MASSAGE

OV3190

EFFECTO MASAJE DE BOMBEO



ONDA DE CHOQUE.

Verdadero tratamiento de bioestimulación que reactiva los procesos fisiológicos de reparación y regeneración, mejora y aumenta la microcirculación venolinfática, reactiva el metabolismo, estimula la lipasa y tonifica.

Sin efecto térmico, sin dolor, de forma rápida. Las ondas de presión alterna, atraviesan los fluidos, actuando única y exclusivamente sobre los adipocitos remodelando los depósitos de grasa y celulitis.

ALTA TECNOLOGÍA Y DISEÑO

Contiene un Software avanzado y una interfaz intuitiva.

Pantalla de 7" con un diseño compacto, haciendo que el equipo se coloque fácilmente en todos los espacios de trabajo.



BODY SLIM ENDOMASSAGE

OVSMA3238-34

La celulitis, las estrías y la retención de líquidos son imperfecciones bastante comunes. Dispositivo equipado con un innovador sistema de endomasaaje para restablecer el correcto funcionamiento corporal.



Un manípulo endomasaaje con cromo frecuencia + 3 aplicadores

Mediante los diferentes aplicadores colocados en el manípulo, se pueden realizar tratamientos de drenaje, oxigenación de tejido, celulitis, masaje dérmico, remodelaje.



Rodillo 35 mm



Rodillo 55 mm



Pequeñas esferas

Características:

- Alimentación: 50 - 60 Hz
- Potencia absorción: 250 W



BODY SLIM ENDOMASSAGE

OV SMA3238-34



MASAJE ENDODÉRMICO.


Uno de los mejores tratamientos revitalizante es el masaje endodérmico, un auténtico masaje del tejido conectivo por aspiración, cuyo objetivo es reactivar el flujo sanguíneo y oxigenar las células.

El manípulo especial de masaje vacuum, permite realizar tratamientos de drenaje y oxigenación simultáneamente.

Utiliza la acción de rodillos o esferas intercambiables que ejercen una presión positiva asociada con la aplicación de presión negativa sobre la piel y el tejido subcutáneo.

- Rodillo 35 mm para zonas específicas
- Rodillo 55 mm para zonas amplias
- Pequeñas esferas, rotura de grasa compacta y masaje remodelante.

El manípulo contiene filtros de limpieza especiales que garantizan la máxima higiene del dispositivo.

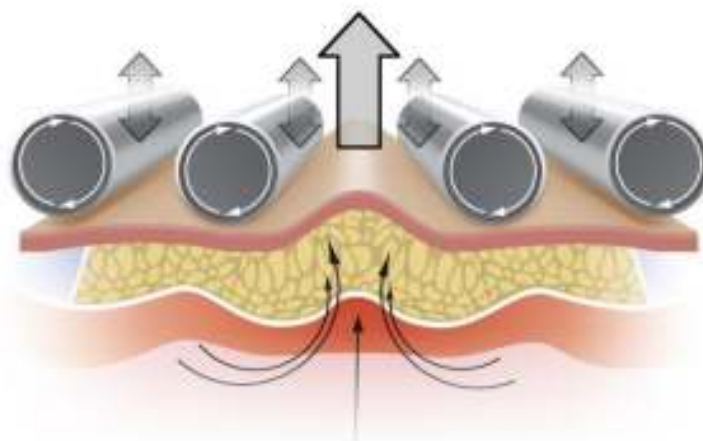

APARATOLOGÍA QETRE

Qetre, firma de aparatología italiana que sabe de belleza y representa el aliado perfecto para cualquier centro que busque calidad, eficacia y seguridad.

Fabricación 100% italiana con todos los certificados de calidad europeos necesarios (UNI EN ISO 9001:2015)



Certificación del Sistema de Gestión de Calidad



Garantía 100% realizado en Italia

QETRE



EPIL SPEEDY NCE

QEPF3410G



EPIL SPEEDY NCE cuenta con la tecnología de luz pulsada controlada más avanzada.

La capacidad de emitir pulsos controlados de luz intensa permite la eliminación del vello evitando por completo el riesgo de quemaduras.

Gracias al sistema compacto de refrigeración por agua con el que está equipado, la velocidad de repetición de disparos es muy rápida, reduciendo así la duración de la sesión de tratamiento.

Permite trabajar con eficacia incluso en áreas muy grandes.

EPIL SPEEDY NCE

QEPF3410G



Características:

- Emite mayor energía con un menor efecto térmico sobre la epidermis. Impulso de salida rápido y de duración ajustable (1,2 a 1,8 segundos)
- Energía de salida constante 3,4 J/cm² a 11,6 J/cm²
- Trabaja sobre melanina y hemoglobina por lo que es muy eficaz en pelo blanco, más débil y cualquier tipo de fototipo de piel.
- Espectro de actuación entre 600nm y 1100 nm.
- Lámpara de gran tamaño (7cm²) y duración de spots de 50000 disparos.
- No necesita que se enfríe entre tratamientos, contiene una refrigeración del cabezal por agua que impide el sobrecalentamiento del cabezal y de la lámpara.

Mira en el siguiente enlace:

<https://youtu.be/9H3imLzujOE>

APARATOLOGÍA **FREIHAUT**

FR-HAUT, firma basada en una metodología biotecnológica que pretende superar las deficiencias, tanto de elaboración, como de aplicación, información y asesoramiento de lo que ofrece el mercado de la cosmética profesional.

Cosmética y aparatología de alta calidad, resistentes, eficaces y seguras, con todos los certificados y garantías necesarios para ser usados en la UE.

FR~HAUT



HEAT WAVE

TERMOFRECUENCIAS INFRARROJAS (TF)

FRP6710




HEAT WAVE es la tecnología con biocerámicas de última generación capaz de emitir termofrecuencias infrarrojas (TF) que hacen vibrar las moléculas de los tejidos del cuerpo; así, se transfiere la energía necesaria para trabajar sobre el metabolismo celular y con ello mejorar las imperfecciones estéticas faciales y corporales. El cuerpo absorbe estas longitudes de onda y las transmite a través de las células, lo que facilita el proceso de desinflamación de los tejidos. **HEAT WAVE** es, por tanto, una herramienta muy eficiente, pero no invasiva, para afrontar la celulitis, la retención de líquidos y el efecto "piel de naranja", sin recurrir a intervenciones.

HEAT WAVE es también la tecnología perfecta para los tratamientos faciales, ya que la energía emitida estimula el metabolismo de regeneración de los tejidos, obligándolo a producir vitaminas, ácido hialurónico y fibras de colágeno. Con ello, se reafirman los tejidos, se proporciona volumen y se reduce la profundidad de las arrugas, para un efecto lifting inmediato.

CARACTERÍSTICAS


HEAT WAVE tiene **5 salidas independientes**, y en la dotación inicial incluye **1 manípulo manual corporal** y **1 manípulo manual facial**.

De forma opcional, se puede adquirir tanto un manípulo facial como corporal extra, que nos permitirían trabajar simultáneamente en ambas partes a tratar, reduciendo así la duración del tratamiento y ofreciendo una experiencia única y de alto rendimiento que permite ofrecer el mayor resultado en el menor tiempo de trabajo.

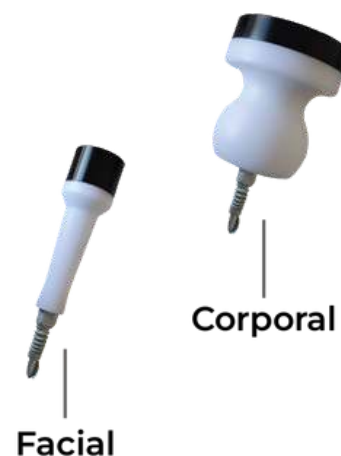

Bandas térmicas corporales (slim bands): existe la posibilidad de ampliar la dotación del aparato con bandas térmicas estáticas (slim bands), que son bandas de un material plástico especial que se aplican alrededor del área a tratar para estimular con el infrarrojo la zona afectada por celulitis o flacidez y mejorar así la metabolización de las grasas o producción de fibras en esa zona.

Existen bandas de 3 **tamaños diferentes, para elegir en función del volumen del área tratada, que se pueden combinar a la vez con los manípulos.**

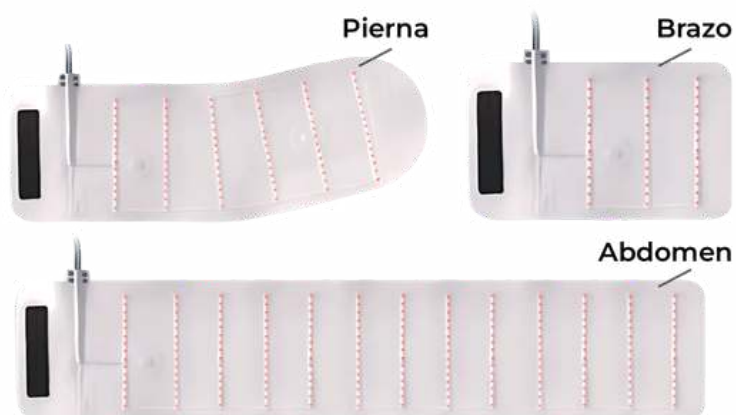

DRAIN 2000

SISTEMA DE COMPRESIÓN DINÁMICA

FRP680/681/682




Potente sistema de compresión dinámica, conocido como PRESOTERAPIA, diseñado para facilitar el trabajo del terapeuta, imitando de forma eficaz el masaje terapéutico manual

CARACTERÍSTICAS

- Dos motores independientes de inflado.
- Sistema de cierre cómodo, rápido y seguro, agrupando todos los canales de entrada de aire de los diferentes sectores en una sola entrada.
- Los sectores de compresión no llevan cámaras de aire y fabricados con un material anti pinchazo.
- Extremadamente silencioso.
- Dispone de 3 programas diferentes:

- A) Drenaje (edemas, varices)
- B) Celulitis
- C) Combinación programa B + A

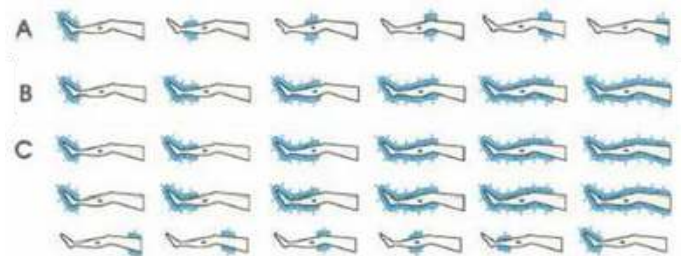

EQUIPOS DRAIN 2000



Equipo Drain FULL

SUIT Mono Completo
+ banda de ampliación



Equipo Drain L Equipo Drain XL

2 Botas
+ 2 Bandas de ampliación
+ 1 Abdomen + 1 brazo

APARATOLOGÍA **KLAPP**

Klapp, firma alemana, que está en continua investigación y desarrollo de nuevos ingredientes activos de alta tecnología, junto con metodologías de trabajo vanguardistas. Sus principales pilares son sus productos de alta calidad y aparatología distinguida que permiten alcanzar óptimos resultados de belleza para cada cliente.

Los procedimientos de control de calidad en todos los pasos de la cadena de producción garantizan la alta calidad de los productos y su seguridad



AQUADERM

(AQUA DERMOABRASIÓN)

KLP945



Aquaderm+ es un equipo estético de última generación que combina diferentes acciones mediante la aplicación de soluciones formuladas específicamente, mezcladas con aire purificado para los diferentes tipos de piel utilizando una punta especial.

- Hidrodermabrasión: Exfoliación con máxima hidratación.
- Aquaporación: Principios activos proyectados a alta presión.
- Efecto Flash- Regeneración
- Constituye una herramienta multifuncional, práctica y muy versátil,
- adaptable a los distintos casos estéticos


CARACTERÍSTICAS

TRES FUNCIONES:

A) HIDRODERMABRASIÓN: Exfoliación a través de un aerógrafo consiguiendo un alto poder de exfoliación sin molestias, sin dolor.

B) AQUAPORACIÓN: Principios activos proyectados a través el aerógrafo de alta presión sobre la piel aumentando su permeabilidad.

C) ESTIMULACIÓN DEL METABOLISMO CUTÁNEO: Al proyectar los principios activos regeneradores estos entran más profundamente en la piel a una temperatura muy baja, potenciando el proceso de creación de colágeno, elastina y fibras que creen sustento en la piel.

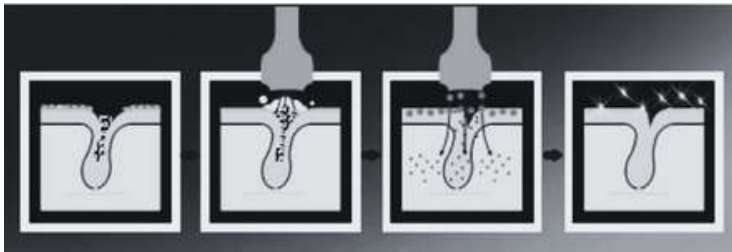

BENEFICIOS

- Retira y elimina células muertas adheridas a la piel.
- Disminuye el tamaño de los poros.
- Proporciona hidratación.
- Estimula metabolismo y regeneración celular.
- Atenúa líneas de expresión, arrugas.
- Reduce hiperpigmentaciones.



HC 9 TERAPIA LUZ- COLOR

HCP192



Máquina de Fotobiodinámica HC9 que saca todo el beneficio a la luz, una forma de energía imprescindible para la vida, capaz de regular el metabolismo y sintetizar sustancias activas imprescindibles para el funcionamiento diario de nuestro organismo.

- Tecnología indolora
- No invasiva
- Fácil de usar
- Muy eficiente



CARACTERÍSTICAS

LUZ VERDE- Detox, Manchas

- Modula la creación de melanina
- Regula la secreción sebácea
- Efecto Detox

LUZ AZUL-Sensibilidad, Acné


- Reequilibra la microbiota de la piel
- Elimina bacterias
- Refuerza sistema inmunológico de la piel

LUZ ROJA-Regeneración, anti-aging

- Estimula circulación sanguínea
- Estimula fibroblastos
- Regenera tejido y produce colágeno y elastina

LUZ AMARILLA- Rojeces, Drenaje, Hidratación

- Mejora circulación sanguínea
- Elimina rojeces y couperose
- Drena (bolsas, post-lifting)
- Hidrata la piel en superficie

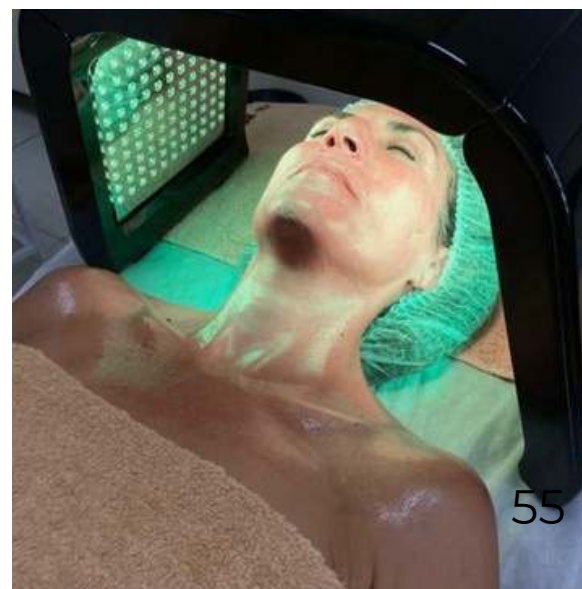

HC 3 SKINSHOOTER

HCP105



HC3 SKINSHOOTER mesoterapia virtual. Consigue hacer penetrar altas concentraciones de activos en las capas intermedias y profundas de la piel, obteniéndose un aporte de sustancias controladas y precisas en zonas muy concretas.

- Método práctico, fácil, cómodo de aplicar y muy efectivo.
- Combina tres corrientes de baja y media frecuencia:
- Iontoforesis
- Electroforesis
- Hidroelectroforesis

BENEFICIOS

- Aumenta penetración de activos en la piel
- Disminuye tamaño de poros y afina arrugas
- Mejora el metabolismo celular
- Suministra humedad en todas las capas de la piel No invasivo
- Sin efectos secundarios

COMPLEMENTOS APARATOLOGÍA

Complementos eléctricos para potenciar los tratamientos y mejorar el bienestar de los clientes.



OVER VAP

OV018



OVER VAP, es un vaporizador que se ha diseñado para combinar con el vapor de agua producido, tanto el ozono como hierbas aromáticas y sustancias esenciales.

Ayuda a suavizar el comedón, mantener el producto cosmético húmedo sobre la piel o para que la piel reciba sus beneficios.

El tratamiento con vapor pulverizado muy finamente, es el método más natural para dilatar poros, eliminar impurezas de la piel y estimular la circulación.

Todas las funciones que tiene OVER VAP, hacen que las partículas microscópicas puedan distribuirse sobre la piel, de modo que desarrollen todos sus efectos beneficiosos y aumenten así las propiedades del tratamiento.



Características:

- Alimentación: 230 Vca 50/60 Hz
- Potencia absorbida: 700 Vatios
- Dimensiones: L 640 mm x P 222 mm x H500 mm

LÁMPARA LED + LUPA

OV9000



Lupa de aumento con led y luz fría.

MANTAS ELÉCTRICAS



SLIMBEAUTY

QE3100

Sauna eléctrica a 24V
3 zonas de calentamiento independientes

SLIM COVER

QE3130

Manta cobertora corporal a 230V



RELAX BODY

QE3120

Manta eléctrica de camilla de masaje a 230V



- Operan con enchufes de seguridad para lograr la máxima seguridad con los clientes
- Sube la temperatura en poco tiempo
- Control eléctrico con varios niveles de temperatura
- Temporizador digital con 4 horas y apagado automático al finalizar el tratamiento
- Material repelente al agua e infugo



Avenida Real de Pinto,75 28021.
Madrid. España

Tlf: +34 91 797 90 040
Mail: info@cosbell.es



www.cosbell.eu

NOVEDADES APARATOLOGÍA



RF-FACE FRACTIONAL

OV865

Equipo que combina 3 tipos de Radiofrecuencia (Bipolar, Multipolar, Fraccionada) para tratamientos faciales.



BODY SLIM ENDOMASSAGE

OVSMA3238-34

Dispositivo equipado con un innovador sistema de **endomasaaje** para restablecer el correcto funcionamiento corporal.



DRAIN 2000

FRP680/681/682

Potente sistema de compresión dinámica, conocido como **PRESOTERAPIA**.



HEAT WAVE

FRP6710

Tecnología con **biocerámicas** de última generación capaz de emitir **termofrecuencias infrarrojas (TF)**.